

## Thérapie & confort




automatic  
— technology —  
BREVET

2  
ANS  
GARANTIE

Score sur l'Échelle de Braden



COMPATIBLE  
PROGRAMME  
AirCare®

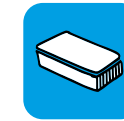

axtar automorpho<sup>®</sup>  
plus

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN** à **ÉLEVÉ**.

Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1** à **4**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

30 ≤ 180kg



NORMES FEUX  
EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D



10,88 € TTC  
Forfait location hebdomadaire  
CODE - 1282740

3 largeurs de lits disponibles 90 | 100 | 120 cm

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- ▶ Décharges talonnières intégrées
- ▶ Réglages confort quelque soit le mode utilisé et la position du patient au lit
- ▶ 3 largeurs disponibles : 90, 100 et 120 cm
- ▶ QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit
- ▶ Livré dans un sac de transport, prêt à l'emploi
- ▶ Démarche d'éco-conception respectueuse de l'environnement
- ▶ 2 housses disponibles : Promust PU HD et Promust CIC
- ▶ Etiquette de traçabilité au pied du matelas



## LES + PRODUIT

- Amélioration de la qualité de soins et de vie du patient.
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant.

## CELLULES

- ▶ 18 cellules en Polyuréthane

QUALITÉ | SOLIDITÉ | SILENCIEUSES



## DÉCHARGE TALONNIÈRE

- ▶ Permet de soulager les pressions dans la zone talonnière en déchargeant une ou plusieurs cellules en pied du matelas



Facilement mise en décharge grâce à une vanne avec molette

## NOUVELLE SÉRIGRAPHIE DE LA HOUSSE

- ▶ Résistance totale à la pénétration des effluents biologiques. Perméable à la vapeur d'eau.
- ▶ Barrières renforcées aux micro-organismes.
- ▶ Usage intensif multi-patient.
- ▶ Largeur du matelas sérigraphiée
- ▶ Rabat long pour une meilleure hygiène
- ▶ Disponible en version Promust CIC \* / PUHD


\* Doté d'un traitement aux ions argent, effet bactériostatique pour limiter les infections croisées

## HOUSSE INFÉRIEURE

- ▶ Dotée d'une base anti-dérapante

## CAISSON INDÉPENDANT AVEC SUPPORT EN MOUSSE

- ▶ Permet de garantir la sécurité du patient en cas d'événements indésirables

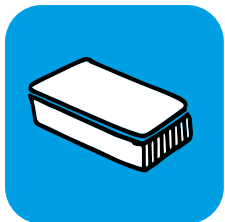

# axtair automorpho<sup>®</sup> plus

## COMPRESSEUR

- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- 3 modes de fonctionnement : dynamique, statique basse pression, soins
- Gestion de la position assise
- Réglage confort quel que soit le mode utilisé ou la position du patient
- Alarmes visuelles et sonores
- QR code "SCAN ME !" pour un accès simple et rapide aux informations produit
- Notice d'utilisation simplifiée sur le côté du compresseur
- Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE



Dynamique



Statique  
basse pression



Soins

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU COMPRESSEUR

DIMENSIONS	22 x 25 x 11.5 cm
MODE DYNAMIQUE (ALTERNÉ)	1 cellule sur 2
TEMPS DE CYCLE COMPLET	9 à 14 minutes
BREVET	Système breveté de calcul automatique
RÉGLAGE	Confort personnalisé
DÉBIT	> 7 l / min
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240 V - 50 Hz
CLASSE	Classe II type BF
CONSOMMATION MOYENNE	5 Wh
PRESSION ACOUSTIQUE SUIVANT NF EN3744	< 35 dBA IP41
CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE ET ÉLECTROMAGNÉTIQUE	Normes IEC 60601-1 Ed.3 ; IEC 60601-1-2





## CONNECTIQUE MATELAS COMPRESSEUR / VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

- ▶ Bouchon de transport pour un confort d'alitement et une autonomie de 8 heures
- ▶ Ouverture et fermeture simple et rapide
- ▶ Dégonflage du matelas en moins de 15 secondes en cas d'urgence \*

\* Pour un patient de 80 kg à plat

## SAC DE TRANSPORT



- ▶ Livré prêt à l'emploi dans un sac de transport (meilleure hygiène et facile à transporter)

## ETIQUETTE DE TRAÇABILITÉ

 <small>WINCARE FRANCE 4, Le Pos du Château 85670 Saint-Hilaire-Mont-Penit</small>	<b>Date de mise en service:</b> Launch date:	FR: La première prévention de l'escarre au lit consiste à changer les points d'appui du corps sur le matelas en moyenne toutes les trois heures, pour limiter la compression trop prolongée des vaisseaux en regard des saillies osseuses et pour permettre l'irrigation des tissus. Ne pas border serré le linge de lit pour garder l'efficacité du matelas  GB: The best way to prevent pressure ulcers when lying down or the seated position is to change the contact points of the body on the support on average every three hours, to limit compressing vessels for too long around bony prominences and to allow tissues to be irrigated.	= 165 Kg = 364 Lb  = 210 Kg = 463 Lb
	<b>Fin de garantie</b> End of guarantee		
	<b>Nom du patient / service :</b> Patient name / department:		

- ▶ Etiquette de traçabilité au pied du matelas

HOUSSE	LARGEUR DE LIT (CM)	CARTON INDIVIDUEL
	90	VAXT4/AUTO-P
	100	VAXT4/AUTO100-P
	120	VAXT4/AUTO120-P
	90	VAXT4/CIC-P
	100	VAXT4/CIC100-P
	120	VAXT4/CIC120-P